

Mikroliterpipette Transferpette® S, BRAND Micropipette Transferpette® S



- In jeder Haltung: komfortable Einhandbedienung
- Für alle Hände: ergonomisches Design
- Sicher: Volumenverstellungsschutz verhindert versehentliche Verstellung

Mit der Kolbenhubpipette Transferpette® S arbeiten Sie bei kleinen und großen Volumina effizient und ergonomisch. Geringe Bedienkräfte und ein kurzer Hubweg sorgen auch bei langen Pipettierserien für entspanntes Pipettieren. Durch die perfekte Ergonomie liegt die Transferpette® S in jeder Halteposition angenehm in der Hand, ob mit der rechten oder der linken Hand, ob mit großen oder kleinen Händen. Ein Umgreifen ist dabei nicht nötig, denn die Mikroliterpipette wartet mit echter Einhandbedienung auf: Volumen einstellen, pipettieren, Spitze abwerfen.

Der Volumenverstellungsschutz lässt sich auch mit Handschuhen leicht bedienen und sichert Ihr eingestelltes Volumen gegen versehentliches Verstellen. Damit auch die Justage leicht von der Hand geht, verfügt die Transferpette® S über die Easy Calibration Technik. Die Justierung kann so ohne Werkzeug erfolgen. Und damit Sie immer die passenden Pipetenspitzen bestellen, zeigt Ihnen die Kompatibilitätstabelle welche Spitzen zu welchem Gerät passen.

Auf einen Blick

- Volumenbereiche Einkanal-Pipette: von 0,1 µl bis 10 ml
- Volumenbereiche Mehrkanal-Pipette: von 0,5 µl bis 300 µl
- Kurzer Hubweg und geringe Bedienkräfte
- Universeller Spitzenaufnahmekonus
- Komplett autoklavierbar bei 121°C
- Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
- Color Code am Volumeneinstellrad, Schaft und Volumenverstellungsschutz
- Leichtes Aufstecken und Abwerfen der Spitzen durch O-Ringe bei Mehrkanalpipetten
- Leicht und ohne Werkzeug justierbar dank Easy Calibration Technik
- Schlanker Schaft zur Entnahme aus engen Gefäßen
- Einsatztemperatur von +15°C bis +40°C
- Dampfdruck bis 500 mbar
- Viskosität bis 260 mPa s

Einkanal-Mikroliterpipette Transferpette® S, Fix, CE-IVD, DE-M

Lieferumfang: Transferpette® S Typ Fix, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Regalhalter, Beschriftungsfolien und Silikonfett

Volumen µl	Modell	Richtigkeit %	Richtigkeit µl	Variations- koeffizient %	Variations- koeffizient µl	Spitzengröße	Best.-Nr.
10	F-10	1	0,1	0,5	0,05	0,5–20	10 49 75808
20	F-20	0,8	0,16	0,4	0,08	2–200	10 49 75816
25	F-25	0,8	0,2	0,4	0,1	2–200	10 49 75820
50	F-50	0,8	0,4	0,4	0,2	2–200	10 49 75828
100	F-100	0,6	0,6	0,2	0,2	2–200	10 49 75838
① 200	F-200	0,6	1,2	0,2	0,4	2–200	10 49 75844
500	F-500	0,6	3	0,2	1	50–1000	10 49 75854
1000	F-1000	0,6	6	0,2	2	50–1000	10 49 75862
2000	F-2000	0,8	16	0,3	6	500–5000	10 49 75864

Einkanal-Mikroliterpipette Transferpette® S, Variabel, CE-IVD, DE-M

Lieferumfang: Transferpette® S Typ Variabel, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Regalhalter, Beschriftungsfolien und Silikonfett

Volumen µl	Modell	Richtigkeit %	Richtigkeit µl	Variations- koeffizient %	Variations- koeffizient µl	Spitzengröße	Best.-Nr.
0,1–1	D-1	2	0,02	1,2	0,012	0,1–20	10 49 75868
0,1–2,5	D-2,5	1,4	0,035	0,7	0,018	0,5–20	10 49 75869
0,5–10	D-10	1	0,1	0,5	0,05	0,5–20	10 49 75870
2–20	D-20	0,8	0,16	0,4	0,08	2–200	10 49 75872
5–50	D-50	0,8	0,4	0,3	0,15	2–200	10 49 75873
10–100	D-100	0,6	0,6	0,2	0,2	2–200	10 49 75874
② 20–200	D-200	0,6	1,2	0,2	0,4	2–200	10 49 75878
100–1000	D-1000	0,6	6	0,2	2	50–1000	10 49 75880
500–5000	D-5000	0,6	30	0,2	10	500–5000	10 49 75882
1000–10000	D-10000	0,6	60	0,2	20	1000–10000	10 49 75884



③ Pipetten-Sets Transferpette® S, Variabel, CE-IVD, DE-M

Artikel	Best.-Nr.
Starter-Kit Micro 3 × Pipetten (0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl, 10–100 µl), 3 × TipBox Pipettenspitzen (2 × 0,5–20 µl, 2–200 µl), 3 Regalhalter	10 49 75890
Starter-Kit Midi 3 × Pipetten (2–20 µl, 20–200 µl, 100–1000 µl), 3 × TipBox Pipettenspitzen (2 × 2–200 µl, 50–1000 µl), 3 Regalhalter	10 49 75891
Starter-Kit Macro 3 × Pipetten (100–1000 µl, 500–5000 µl, 1000–10000 µl), 3 × TipBox Pipettenspitzen (50–1000 µl, 0,5–5 ml, 1–10 ml), 3 Regalhalter	10 49 75892
Starter-Kit Standard 3 × Pipetten (0,5–10 µl, 10–100 µl, 100–1000 µl), 3 × TipBox Pipettenspitzen (0,5–20 µl, 2–200 µl, 50–1000 µl), 3 Regalhalter	10 49 75893
Pipetten-Paket 1 5 × Pipetten (0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl, 2–20 µl, 20–200 µl, 100– 1000 µl), 3 × TipBox Pipettenspitzen (0,5–20 µl, 2–200 µl, 50–1000 µl), Tischständer für 6 Geräte	10 49 75896
Pipetten-Paket 2 5 × Pipetten (0,5–10 µl, 10–100 µl, 20–200 µl, 100–1000 µl, 500– 5000 µl), 4 × TipBox Pipettenspitzen (0,5–20 µl, 2–200 µl, 50– 1000 µl, 0,5–5 ml), Tischständer für 6 Geräte	10 49 75897



③

Mehrkanal-Mikroliterpipette Transferpette® S -8, Variabel, CE-IVD, DE-M

Lieferumfang: Transferpette® S -8, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, 2 × Tip-Box gefüllt mit Pipettenspitzen von BRAND, Regalhalter, Reagenzreservoir, Montageschlüssel, Beschriftungsfolien, Silikonfett und 1 Satz Schaftdichtungen

Volumen	Modell	Richtigkeit	Richtigkeit	Variations-	Variations-	Spitzen-	Best.-Nr.
µl		%	µl	koeffizient	koeffizient	größe	
0,5–10	M8-10	1,6	0,16	1	0,1	0,5–20	10 49 75900
5–50	M8-50	0,8	0,4	0,4	0,2	2–200	10 49 75906
10–100	M8-100	0,8	0,8	0,3	0,3	2–200	10 49 75908
20–200	M8-200	0,8	1,6	0,3	0,6	2–200	10 49 75910
30–300	M8-300	0,6	1,8	0,3	0,9	5–300	10 49 75912

④



④

⑤

Mehrkanal-Mikroliterpipette Transferpette® S -12, Variabel, CE-IVD, DE-M

Lieferumfang: Transferpette® S -12, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, 2 × Tip-Box gefüllt mit Pipettenspitzen von BRAND, Regalhalter, Reagenzreservoir, Montageschlüssel, Beschriftungsfolien, Silikonfett und 1 Satz Schaftdichtungen


Volumen	Modell	Richtigkeit	Richtigkeit	Variations-	Variations-	Spitzen-	Best.-Nr.
µl		%	µl	koeffizient	koeffizient	größe	
0,5–10	M12-10	1,6	0,16	1	0,1	0,5–20	10 49 75920
5–10	M12-50	0,8	0,4	0,4	0,2	2–200	10 49 75926
10–100	M12-100	0,8	0,8	0,3	0,3	2–200	10 49 75928
20–200	M12-200	0,8	1,6	0,3	0,6	2–200	10 49 75930
30–300	M12-300	0,6	1,8	0,3	0,9	5–300	10 49 75932

⑤

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
⑥ Tischständer (Rondell) für 6 Transferpette® S oder S -8/-12	10 49 74807
Regalhalter für 1 Pipette Transferpette® S oder S -8/-12	10 49 74811
Wandhalter für 1 Pipette Transferpette® S oder S -8/-12	10 49 74812

⑥

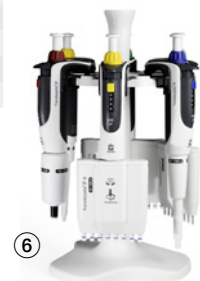

⑥

